


Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**

BAÑO TERMOSTÁTICO PARA HISTOLOGÍA

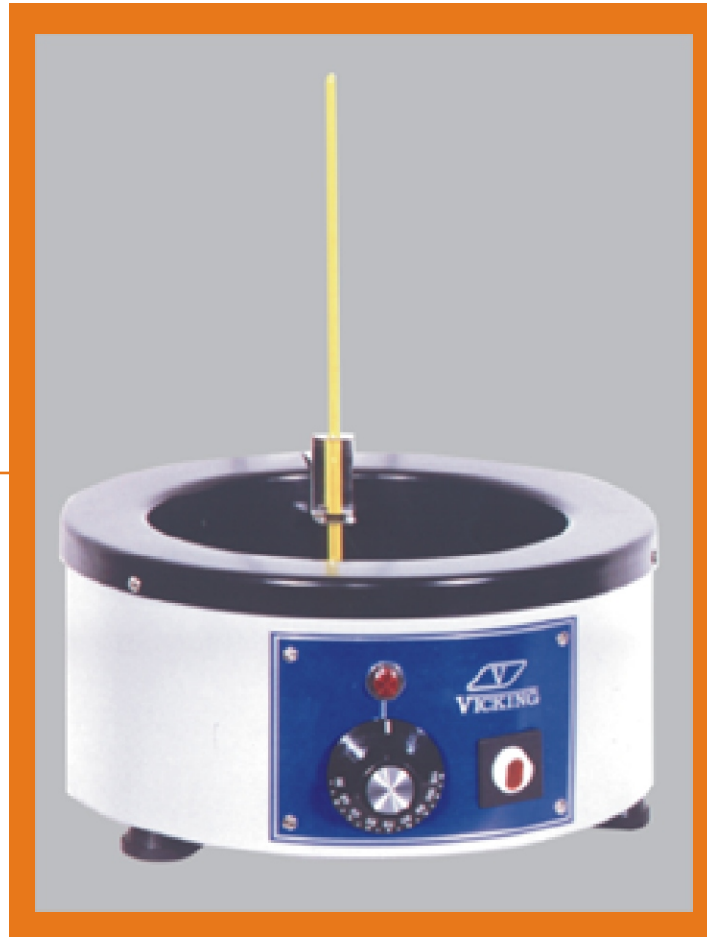

Descripción

Baño especial para estirado y secado de cortes de tejido para Laboratorio de Histología, Patología, Clínica y Bacteriología.

La cuba y el borde del Baño, contruidos en aluminio, están terminados en negro semibrillante para mejor visibilidad de los cortes de tejido.

Gabinete exterior en chapa de hierro doble decapada.

Control exacto de temperatura con precisión de más/menos 0,5° C.

Los cortes son cuidadosamente secados sobre el borde caliente del Baño.

Rango de Temperatura: 5° C por encima de la temperatura ambiente hasta 80° C.

Panel de control: incluye el interruptor principal con luz piloto incorporado, perilla del termostato para la regulación de la temperatura y luz piloto del termostato.

Termómetro de control, escala 0 - 100° C. división 1° C con soporte de acero inoxidable que se fija en el borde del Baño.

Se afirma sobre tres patas de goma.

Cable trifilar con ficha moldeada con conexión a tierra.

Fusible de 3 Ampere

Para conectar a 220 V - 50 / 60 Hz.

Distribuidor Oficial

Catálogo N° 3501